



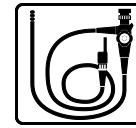

# neodisher® Septo PreClean

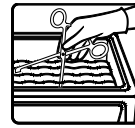

## Καθαριστικό και απολυμαντικό για την επανεπεξεργασία με βυθισμό θερμοανθεκτικών και θερμοευαίσθητων εργαλείων

### Συμπυκνωμένο υγρό

#### Τομείς εφαρμογής:

- Απολύμανση και πρόπλυση θερμοανθεκτικών και θερμοευαίσθητων εργαλείων, οδοντιατρικών εργαλείων και εύκαμπτων ενδοσκοπίων π.χ. πριν την αυτόματη επανεπεξεργασία για την καλύτερη δυνατή ασφάλεια του προσωπικού
- Μακροχρόνιος βυθισμός χειρουργικών και οδοντιατρικών εργαλείων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, π.χ. καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας ή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου
- Επίσης, κατάλληλο για καθαρισμό και απολύμανση με βυθισμό θερμοανθεκτικών και θερμοευαίσθητων εργαλείων συμπεριλαμβανομένων των εύκαμπτων ενδοσκοπίων

#### Φάσμα δράσης:

- Βακτηριοκτόνος και μυκητοκτόνος δράση σύμφωνα με τις μεθόδους του VAH<sup>1</sup> και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα<sup>2</sup>, επίσης, δραστικό έναντι των ιών με περίβλημα σύμφωνα με Ευρωπαϊκά πρότυπα<sup>2</sup> και το RKI/DVV<sup>3</sup>. Η δράση του επιβεβαιώνεται από πιστοποιητικά.
- Συμβατό με ανοξείδωτο ατσάλι, ανοδιωμένο αλουμίνιο, μη σιδηρούχα μέταλλα (ορείχαλκος και χαλκός), σιλικόνη και πλαστικό.
- Περιλαμβάνεται στη λίστα VAH<sup>1</sup> και στη λίστα απολυμαντικών IHO<sup>4</sup>

#### Ειδικές ιδιότητες:

- Άριστη καθαριστική δράση χωρίς πήξιμο των πρωτεϊνών
- Άριστη συμβατότητα με τα υλικά
- Χωρίς αλδεύδες και άλατα τεταρτογενούς αμμωνίου

#### Εφαρμογή και δοσολογία:

Το neodisher Septo PreClean χρησιμοποιείται με βυθισμό και σε πλυντήρια υπερήχων. Ανάλογα με την επιθυμητή δράση, το ενεργό διάλυμα πρέπει να παρασκευαστεί σύμφωνα με τις συστάσεις δοσολογίας. Τοποθετήστε τα εργαλεία π.χ. ενδοσκόπια χωρίς φυσαλίδες αέρα μέσα στο ενεργό διάλυμα και τηρήστε τους παρακάτω αναφερόμενους χρόνους επαφής.

Για προετοιμασία ενεργών διαλυμάτων με neodisher Septo PreClean προτείνεται η χρήση μαλακού νερού ή μαλακού νερού με σκληρότητα μικρότερη των 10 °d (1.8 mmol/l). Η σκληρότητα του νερού δεν πρέπει να ξεπερνά τους 20 °d (3.6 mmol/l).

Για μακροχρόνιο βυθισμό τα εργαλεία μπορούν να παραμείνουν στο διάλυμα του neodisher Septo PreClean με ασφάλεια έως 72 ώρες.

Απολυμαντική δράση (20 °C, ρυπαρές συνθήκες)	
Βακτηριοκτόνο (EN 13727, EN 14561, VAH)	5 ml/l (0.5%), 15 min
Ζυμοκτόνο (EN 13624, EN 14562, VAH)	5 ml/l (0.5%), 15 min
Δραστικό έναντι ιών με περίβλημα (συμπ. HIV, HBV, HCV) (EN 14476, EN 17111)	15 ml/l (1.5%), 15 min
Δραστικό έναντι ιών με περίβλημα (συμπ. HIV, HBV, HCV) (RKI/DVV)	10 ml/l (1.0%), 15 min

Το αχρησιμοποίητο ενεργό διάλυμα neodisher Septo PreClean μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως 7 ημέρες. Μολυσμένα διαλύματα πρέπει να αντικαθίστανται ή άμεσα εάν υπάρχουν ορατοί ρύποι, σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία του Ινστιτούτου Robert Koch.

Το διάλυμα του neodisher Septo PreClean πρέπει να ξεπλένεται πλήρως με νερό (κατά προτίμηση απιονισμένο νερό). Μικρά υπολείμματα του neodisher Septo PreClean που μπορεί να παραμείνουν στα εργαλεία όταν αυτά τοποθετηθούν στο πλυντήριο – απολυμαντή, δεν προκαλούν αφρό, ούτε απώλεια πίεσης στις αντλίες ανακυκλοφορίας.

Προϊόντα που περιέχουν αλδεύδες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πριν ή μετά την απολύμανση με το neodisher Septo PreClean.

#### Γενικές οδηγίες χρήσης:

- Μόνο για επαγγελματική χρήση!
- Για οικονομική και ελεγχόμενη δοσολογία, είναι διαθέσιμα βοηθήματα εφαρμογής όπως η δοσομετρική συσκευή neomatik® mediDOS. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.



# neodisher® Septo PreClean

- Γενικά κατά τον χειρωνακτικό χειρισμό απολυμαντικών συστήνεται η χρήση προστατευτικών γαντιών.
- Η επανεπεξεργασία θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις σύμφωνα με την Οδηγία περί Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και θα πρέπει να γίνεται με κατάλληλες επικυρωμένες διαδικασίες.
- Παρακαλούμε, όπως τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή των εργαλείων για επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του DIN EN ISO 17664.
- Δεν είναι κατάλληλο για υψηλού βαθμού απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων
- Να μην αναμειγνύεται με άλλα προϊόντα.

## Αναφορές εμπειρογνομόνων:

Η απολυμαντική δράση επιβεβαιώνεται με πιστοποίηση. Αντίγραφα των μελετών είναι διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τιμή pH	8.9 - 8.7 ( 5 - 15ml, υπολογισμένο σε απιονισμένο νερό, 20 °C)
Ιξώδες	<50 mPa s (συμπυκνωμένο, 20 °C)
Πυκνότητα	περ. 1.0 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)

## Συστατικά:

Συστατικά σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Νο. 648/2004 για τα απορρυπαντικά:  
<5 % μη ιονικά τασιενεργά  
5 - 15 % αμφοτερικά τασιενεργά  
επίσης απολυμαντικά, αρώματα (λιμονένιο)

Δραστικά συστατικά ανά 100 γρ.:  
8,0 γρ. Λαουροπροπυλική διαμίνη

Σήμανση CE:

Το neodisher Septo PreClean συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Εάν προκύψει σοβαρό συμβάν με το προϊόν, το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια εθνική αρχή.

## Πληροφορίες αποθήκευσης:

Πάντοτε αποθηκεύετε σε χώρο με θερμοκρασία μεταξύ 0°C και 30 °C. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 3 χρόνια όταν αποθηκεύεται σύμφωνα με τις οδηγίες.αι. Για την ημερομηνία λήξης ανατρέξτε στην ετικέτα δίπλα στο σύμβολο της κλεψύδρας.

Αλλαγές στο χρώμα του προϊόντος μπορεί να προκύψουν όταν αποθηκεύεται σφραγισμένο στην εργοστασιακή συσκευασία. Αυτό δεν έχει επίπτωση στις ιδιότητες του προϊόντος που σχετίζονται με την εφαρμογή του.

## Προειδοποιήσεις κινδύνων και οδηγίες ασφαλείας:

Για πληροφορίες ασφαλείας δείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας. Αυτά είναι διαθέσιμα στο [www.drweigert.com](http://www.drweigert.com) στην κατηγορία «Service/Downloads».

Διαθέστε προς απόρριψη μόνο όταν το δοχείο είναι άδειο και κλειστό. Για τη διάθεση των υπολειμμάτων του προϊόντος, συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

MB 4503/3-5  
Ημερομηνία Αναθεώρησης: 07/2020

<sup>1</sup> Ένωση Εφαρμοσμένης Υγιεινής (VAH)

<sup>2</sup> σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN13727, EN13624, EN14561, EN14562, EN 14476, EN 17111

<sup>3</sup> σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Ινστιτούτου Robert Koch (RKI) και της Γερμανικής Ένωσης για τον έλεγχο των Ιώσεων (DVV)

<sup>4</sup> Βιομηχανική Ένωση Προστασίας Επιφανειών και Υγιεινής (IHO), Γερμανία

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΘΗΝΑ: Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος, Τηλ. Κέντρο 210 48 38 224

Fax: 210 48 38 547 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ. / Fax: 2310 216 718

Email: [direct@pcosmidis.gr](mailto:direct@pcosmidis.gr) • Web site: [www.pcosmidis.gr](http://www.pcosmidis.gr)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ΔΥ86/1348

Με τις παραπάνω πληροφορίες, σύμφωνα με τις τρέχουσες γνώσεις μας, περιγράφουμε το προϊόν μας σχετικά με τις ανάγκες ασφαλείας, αλλά δεν περιλαμβάνουμε ποιοτική περιγραφή ή υπόθεση συγκεκριμένων ιδιοτήτων.