
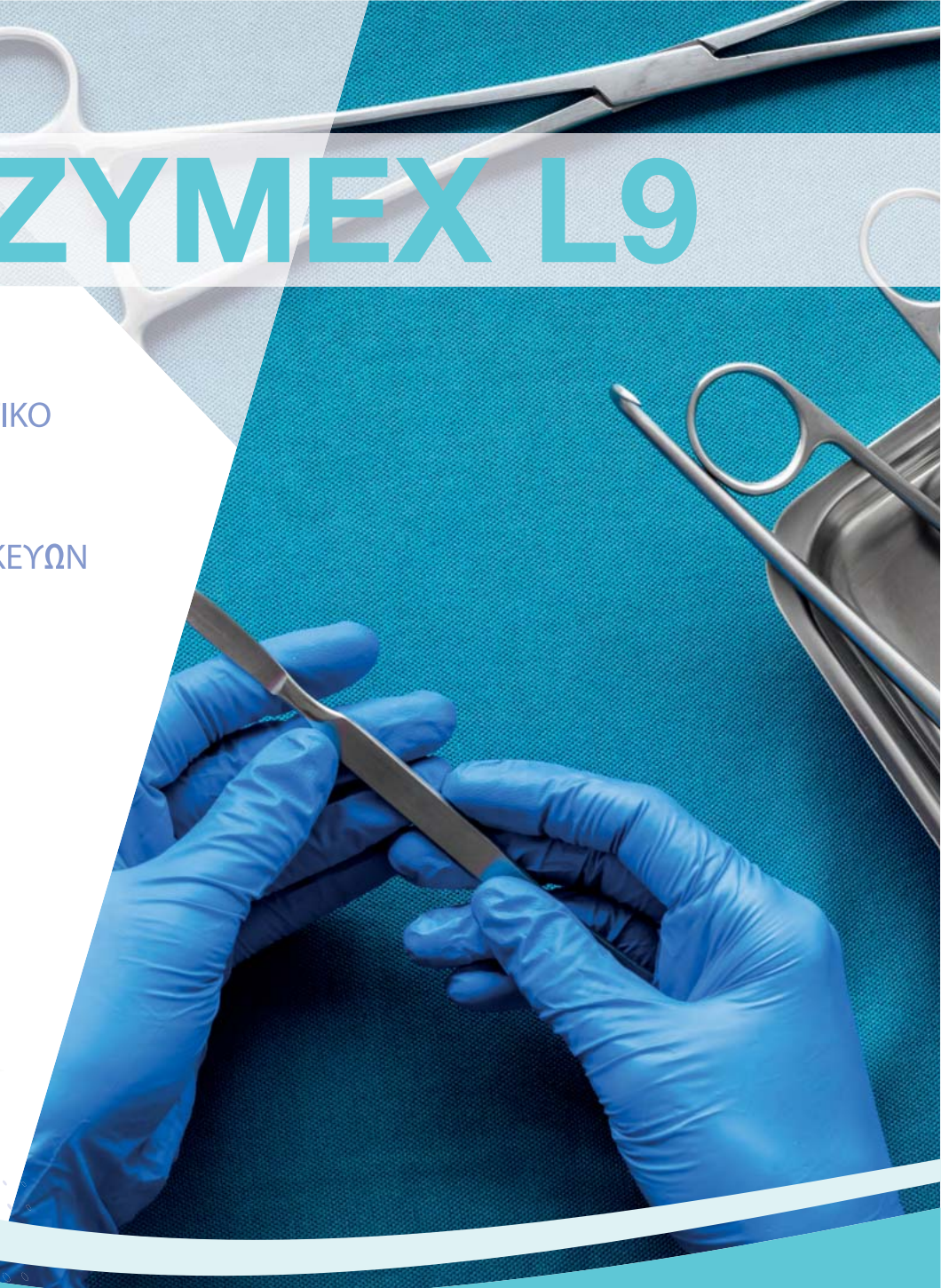


ENZYMEX L9

ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

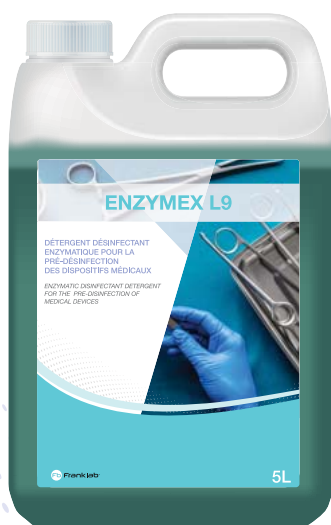

■ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Χειρουργείο, ενδοσκόπηση, οφθαλμολογικός εξοπλισμός και φακοί επαφής

■ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Τριενζυματικό σύμπλεγμα (λιπάση, αμυλάση, πρωτεάση) σε συνδυασμό με αποτελεσματικά τασιενεργά
- Εγγυημένη προστασία εργαλείων για εμφότιση έως 72 ώρες
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λουτρά υπερήχων
- Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα έναντι του βιοφίλμ *Pseudomonas aeruginosa*

ENZYMEX L9

ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

■ Προετοιμασία του απολυμαντικού διαλύματος:

- Φορέστε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό
- Διαλύστε την κατάλληλη ποσότητα **ENZYMEX L9** σε 5 λίτρα νερού και ομογενοποιήστε το διάλυμα (δείτε τον πίνακα διάλυσης)

Δόση για 5L	Συγκέντρωση διαλύματος		
	0,5%	2%	5%
	25 ml	100 ml	250 ml

■ Χρήση:

- 1- Τα λερωμένα εργαλεία πρέπει να βυθιστούν πλήρως
 - 2- Τρίψτε τις ιατρικές συσκευές και χρησιμοποιήστε swab εάν χρειάζεται
 - 3- Χρόνος επαφής: σύμφωνα με την επιθυμητή αντιμικροβιακή δράση (βλ. απολυμαντικές ιδιότητες)
 - 4- Ξεπλύνετε καλά
- Ανανεώστε το λουτρό μετά από κάθε χρήση (ή ακολουθήστε τις ισχύουσες τοπικές συστάσεις). Σύμφωνα με τη γαλλική οδηγία DGS της 1ης Δεκεμβρίου 2011 (εξαιρουμένης της ενδοσκοπήσης και του ATNC), το λουτρό πρέπει να ανανεώνεται τουλάχιστον κάθε 24 ώρες και κάθε φορά που φαίνεται λερωμένο.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητα	Πρότυπα	Στελέχη	Συγκέντρωση	Χρόνος επαφής
Βακτηριοκτόνο	EN 13727	<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	0,5%	5 minutes
	EN 14561		0,5%	10 minutes
	EN 13727	<i>Enterococcus faecium</i> VRE	0,5%	10 minutes
Ζυμοκτόνο	EN 13624	<i>Candida albicans</i>	0,5%	5 minutes
	EN 14562		0,5%	10 minutes
	EN 13624	<i>Candida auris</i>	0,5%	5 minutes
Ιοκτόνο έναντι ιών με περίβλημα ⁽¹⁾	EN 14476	<i>Vaccinia virus</i>	0,5%	10 minutes
	EN 17111			
Δραστικό έναντι του Herpesvirus	EN 14476	<i>Herpesvirus</i>	0,5%	5 minutes
Δραστικό έναντι HIV, DBV	EN 14476	<i>Virus DBV (virus modèle de l'Hépatite C)</i> , HIV	0,5%	10 minutes
Φυματιοκτόνο	EN 14348	<i>Mycobacterium terrae</i>	2%	60 minutes
			5%	10 minutes
			2%	60 minutes
	EN 14563	<i>Mycobacterium terrae</i>	5%	10 minutes

(1) : Το τεσ που σχετίζεται με την ιοκτόνο δράση έναντι ιών με περίβλημα (*Vaccine Virus*) είναι αντιπροσωπευτικό των ιών με περίβλημα που παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α των προτύπων EN 14476+A2 και EN 16777 και στο Παράρτημα Β του προτύπου EN 17111, όπως: Ο ιός της ηπατίτιδας Β (HBV), ο ιός της ηπατίτιδας C (HCV), ο ιός της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV), ο ιός του έρπητα (*Herpes virus*), ο κορωνοϊός, ο ιός της γρίπης, η λύσσα, ερυθρά, ιλαρά, κ.λπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- 1 Φακελίσκος 25ml κωδ.
- 2 Δοχείο 1L κωδ. **1043501**
- 3 Δοχείο 5L κωδ. **1043505**



Προϊόν για επαγγελματική χρήση - ακολουθήστε τις προφυλάξεις χρήσης. Πριν από τη χρήση, διαβάστε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν. Ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας IIb