

medi**pal**

CHLORINE DISINFECTANT Wipes



Τα έτοιμα προς χρήση μαντηλάκια χλωρίου προσφέρουν ταχεία βιοκτόνο δράση ενάντια σε ένα ευρύ φάσμα μικροοργανισμών και σπόρων σε μη πορώδεις επιφάνειες μη επεμβατικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

1 προϊόν σε αυτή τη γκάμα.

Με μια ματιά:



- Χωρίς PHMB
- Χωρίς αλκοόλες
- Δερματολογικά ελεγμένα
- Ελαφριά οσμή χλωρίου
- Έτοιμα προς χρήση

Ιδανικά για:



- Υψηλού βαθμού απολύμανση όπου υπάρχει μόλυνση ή κίνδυνος μόλυνσης*
- Γρήγορη χρήση σε ευαίσθητες στο χρόνο περιοχές σε έτοιμη προς χρήση μορφή
- Χρησιμοποιήστε εκεί όπου η τοξικότητα ή η διάβρωση από άλλα απολυμαντικά υψηλού βαθμού προκαλεί προβλήματα

Συμβατότητα υλικών:



- Ακρυλικό (PMMA)
- Πολυκαρβονικό (PC)
- Πολυαιθυλένιο (PE)
- Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
- Αδιάβροχο ύφασμα
- 316 ανοξείδωτο ατσάλι
- 304S15 ανοξείδωτο ατσάλι

* Δεν προορίζονται για τελική αποστείρωση ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Βιωσιμότητα:




- Το χαρτόνι που χρησιμοποιείται στην εξωτερική μας συσκευασία έχει έγκριση FSC



Οδηγίες χρήσης


ΒΗΜΑ 1 Αξιολόγηση κινδύνου

Ακολουθήστε τις κατευθυντήριες οδηγίες της μονάδας σας για την αξιολόγηση κινδύνου, σχετικά με τη χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. Ελέγξτε τις οδηγίες των κατασκευαστών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την συμβατότητα του υποχλωριώδους νατρίου.

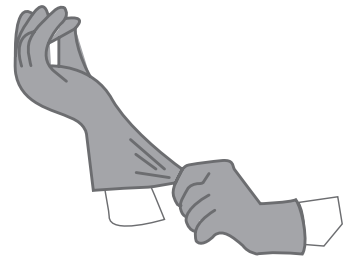


ΒΗΜΑ 2 Επιλογή μαντηλιού

Ελέγξτε τη συσκευασία για την περίοδο χρήσης και πάρτε ένα μαντηλάκι. Κλείστε τη συσκευασία για να προστατεύσετε τα εναπομείναντα μαντηλάκια. Εάν υπάρχουν ορατοί ρύποι, απομακρύνετε τους με ένα μαντηλάκι. Χρησιμοποιήστε ένα καινούριο μαντηλάκι για να απολυμάνετε την επιφάνεια.

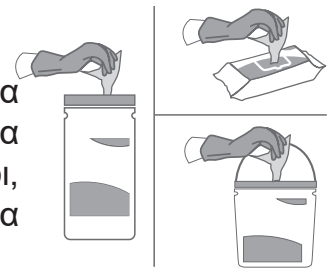

ΒΗΜΑ 3 Τεχνική S-Shape

Σκουπίστε την επιφάνεια προς απολύμανση με την τεχνική S από την πιο καθαρή στην πιο βρώμικη περιοχή. Χρησιμοποιήστε το μαντηλάκι επίπεδο, χωρίς να το τσαλακώνετε, διασφαλίζοντας ότι όλη η επιφάνεια είναι υγρή. Μην περνάτε την ίδια περιοχή δύο φορές με το ίδιο μαντηλάκι. Χρησιμοποιήστε και δεύτερο καινούριο μαντηλάκι, εάν το πρώτο λερωθεί πολύ ή στεγνώσει.

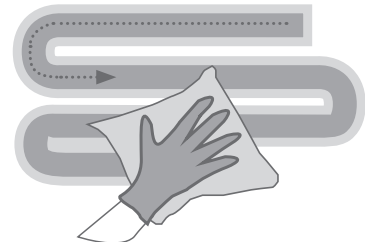

ΒΗΜΑ 4 Απόρριψη


Μην επαναχρησιμοποιείτε μαντηλάκια. Πετάξτε τα χρησιμοποιημένα μαντηλάκια σε κατάλληλο κάδο απορριμμάτων, ακολουθώντας τις τοπικές οδηγίες.



Μην απορρίπτετε
στην αποχέτευση

ΒΗΜΑ 5 Στέγνωμα

Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει φυσικά πριν τη χρήση, για τον αναφερόμενο χρόνο επαφής.

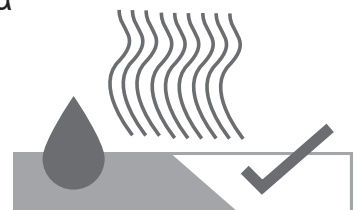

Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν από τη χρήση. Η επαναχρησιμοποίηση των μαντηλιών αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης. Πετάξτε κάθε μαντηλάκι μετά από μία χρήση. Φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Chlorine V12 Map 2025

medi**pal**

Τεχνικές πληροφορίες

Η μοναδική μας σύνθεση υποχλωριώδους νατρίου προσφέρει την αποτελεσματικότητα που χρειάζεστε σε χαμηλότερο pH από παρόμοια μαντηλάκια με υπεροξικό οξύ ή υπεροξειδίο του υδρογόνου (pH 8,5-10 σε σύγκριση με pH 12). Αυτό σημαίνει ότι τα μαντηλάκια είναι λιγότερο διαβρωτικά σε επιφάνειες που επηρεάζονται από υψηλότερες τιμές pH.

Η μοναδική έτοιμη προς χρήση συσκευασία flow wrap δημιουργεί επίσης λιγότερα απόβλητα, απαιτεί λιγότερο χώρο αποθήκευσης και είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον κατά τη μεταφορά.

Χημική σύνθεση:



Τα απολυμαντικά μαντηλάκια Medipal Chlorine παράγονται με σταθεροποιημένο υποχλωριώδες νάτριο NaClO . Το εξαιρετικά ισχυρό απολυμαντικό διάλυμα με βάση το χλώριο δίνει περισσότερα από 1000 ppm διαθέσιμο χλώριο και επομένως παρουσιάζει ευρέως φάσματος αντιμικροβιακή δράση με χαμηλότερο pH, από πολλά άλλα προϊόντα χλωρίου.

Υλικά:



Το υλικό Spunlace κατασκευάζεται με μηχανική εμπλοκή ινών με την εφαρμογή νερού υψηλής πίεσης. Αυτό δίνει στο υλικό μια παχιά, απαλή και δυνατή αίσθηση. Η διάτρητη υφή δίνει στα μαντηλάκια μεγάλη χωρητικότητα υγρού, που τα καθιστά κατάλληλα για σκούπισμα μεγαλύτερων επιφανειών, και το υλικό δίνει μια αίσθηση υφάσματος.

Αποτελεσματικότητα

Αποτελεσματικό έναντι Τεστ Χρόνος επαφής

Βακτηριοκτόνο

Leptospira interrogans	EN 13727	1 λεπτό
Enterococcus hirae	EN 16615	1 λεπτό
	EN 13727	1 λεπτό
Pseudomonas aeruginosa	EN 16615	1 λεπτό
	EN 13727	1 λεπτό
Staphylococcus aureus	EN 16615	1 λεπτό
	EN 13727	1 λεπτό

Μυκοβακτηριοκτόνο

Mycobacterium avium	EN 14348	1 λεπτό
Mycobacterium terrae	EN 14348	1 λεπτό

Σποροκτόνο

Bacillus cereus	EN 17126	5 λεπτά
Bacillus subtilis	EN 17126	5 λεπτά
Clostridium difficile*	EN 17126	3 λεπτά
*as tested on spores	EN 16615	2 λεπτά
	EN 17846	5 λεπτά

Αποτελεσματικό έναντι Τεστ Χρόνος επαφής

Ιοκτόνο

Adenovirus 5*	EN 14476	1 λεπτό
	EN 16777	1 λεπτό
Murine norovirus*	EN 14476	1 λεπτό
	EN 16777	1 λεπτό
Poliovirus*	EN 14476	1 λεπτό
* These organisms represent Full Virucidal efficacy according to EN 14476:2013+A2:2019 Annex A		
Coronavirus*	EN 14476	1 λεπτό
* Tested against Human Coronavirus, strain 229E		

Ζυμοκτόνο και μυκητοκτόνο

Aspergillus brasiliensis	EN 13624	2 λεπτά
Candida albicans	EN 16615	1 λεπτό
	EN 13624	2 λεπτά
Candida auris	EN 13624	1 λεπτό

Λεπτομέρειες προϊόντος:



Ποσότητα – 50 μαντήλια ανά συσκευασία

Πακέτα ανά συσκευασία – 12

Κωδικός προϊόντος– S570110MPCE

Ταξινόμηση – Ιατροτεχνολογικό προϊόν Class IIa

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΘΗΝΑ: Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος, Τηλ. Κέντρο 210 48 38 224
Fax: 210 48 38 547 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ. / Fax: 2310 216 718
Email: direct@pcosmidis.gr • Web site: www.pcosmidis.gr
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ΔΥ86/1348

Chlorine V12 Μαρ 2025

Pal International Limited

Unit 3 Mountpark,
Victoria Road, Bardon II,
Ellistown,
Coalville,
LE69 1FA, UK

E: info@palinternational.com

W: www.palinternational.com

EC REP Advena Limited

Tower Business Centre
2nd Floor
Tower Street Swatar
BKR 4013, Malta

E: info@advena.mt

