

medipal

Disinfectant Wipes



Η γκάμα μαντηλιών καθημερινής απολύμανσης με τις καλύτερες πωλήσεις, τα Medipal Disinfectant Wipes προσφέρουν μεγάλη ευελιξία. Η ισχυρή χημική σύνθεση προσφέρει ευρέως φάσματος αποτελεσματικότητα που είναι ιδανική για την απολύμανση επιφανειών μη επεμβατικών ιατρικών συσκευών.



Με μια ματιά:



- Χωρίς αλκοόλες
- Χωρίς PHMB
- Δερματολογικά ελεγμένα
- Έτοιμα προς χρήση
- Βιοδιασπώμενη φόρμουλα

Ιδανικά για:



- Ενδιάμεση απολύμανση όπου υπάρχει μόλυνση ή κίνδυνος μόλυνσης*
- Για περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης. Διαθέσιμα σε συσκευασίες flow wraps, δοχεία και κουβαδάκια
- Απολύμανση επιφανειών μη επεμβατικών ιατρικών συσκευών και εξοπλισμού

*Δεν προορίζονται για τελική αποστείρωση
ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Βιωσιμότητα:



- 89% μείωση πλαστικού για την σακούλα επαναπλήρωσης έναντι του κουβά με καπάκι
- Ελαφρύτερο δοχείο 2 λίτρων με 27% μείωση πλαστικού
- Το υλικό Tritex, τα δοχεία, τα κουβαδάκια, τα καπάκια και οι ετικέτες είναι πλήρως ανακυκλώσιμα
- Το χαρτόνι που χρησιμοποιείται στην εξωτερική συσκευασία έχει έγκριση FSC

Συμβατότητα υλικών:



- Ακρυλικό (PMMA)
- Πολυκαρβονικό (PC)
- Πολυαιθυλένιο (PE)
- Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
- Αδιάβροχο ύφασμα
- 316 ανοξείδωτο ατσάλι
- 304S15 ανοξείδωτο ατσάλι

Disinfectant V15 Φεβ 2024




CE
2797



Οδηγίες χρήσης


ΒΗΜΑ 1 Αξιολόγηση κινδύνου

Ακολουθήστε τις κατευθυντήριες οδηγίες της μονάδας σας για την αξιολόγηση κινδύνου, σχετικά με τη χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

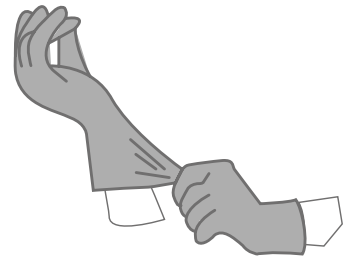


ΒΗΜΑ 2 Επιλογή μαντηλιού

Ελέγξτε τη συσκευασία για την περίοδο χρήσης και πάρτε ένα μαντηλάκι. Κλείστε τη συσκευασία για να προστατεύσετε τα εναπομείναντα μαντηλάκια. Εάν υπάρχουν ορατοί ρύποι, απομακρύνετε τους με ένα μαντηλάκι. Χρησιμοποιήστε ένα καινούριο μαντηλάκι για να απολυμάνετε την επιφάνεια.

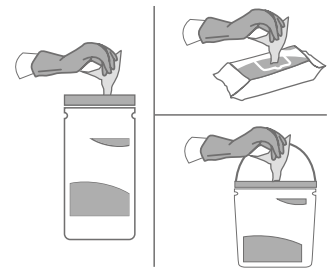

ΒΗΜΑ 3 Τεχνική S-Shape

Σκουπίστε την επιφάνεια προς απολύμανση με την τεχνική S από την πιο καθαρή στην πιο βρώμικη περιοχή. Χρησιμοποιήστε το μαντηλάκι επίπεδο, χωρίς να το τσαλακώνετε, διασφαλίζοντας ότι όλη η επιφάνεια είναι υγρή. Μην περνάτε την ίδια περιοχή δύο φορές με το ίδιο μαντηλάκι. Χρησιμοποιήστε και δεύτερο καινούριο μαντηλάκι, εάν το πρώτο λερωθεί πολύ ή στεγνώσει.

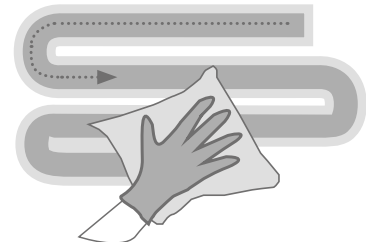

ΒΗΜΑ 4 Απόρριψη


Μην επαναχρησιμοποιείτε μαντηλάκια. Πετάξτε τα χρησιμοποιημένα μαντηλάκια σε κατάλληλο κάδο απορριμμάτων, ακολουθώντας τις τοπικές οδηγίες.



Μην απορρίπτετε
στην αποχέτευση

ΒΗΜΑ 5 Στέγνωμα

Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει φυσικά πριν τη χρήση, για τον αναφερόμενο χρόνο επαφής.

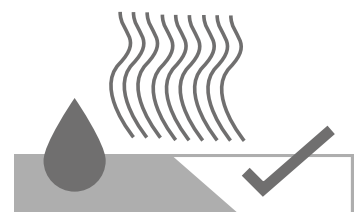

Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν από τη χρήση. Η επαναχρησιμοποίηση των μαντηλιών αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης. Πετάξτε κάθε μαντηλάκι μετά από μία χρήση. Φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

medi**pal**

Τεχνικές πληροφορίες

Το υλικό Tritex® ιδιοκτησίας της Medipal, κατασκευάζεται με τη συγκόλληση στρωμάτων ινών πολυπροπυλενίου spunbond και meltblown με μια διεργασία υψηλής θερμότητας. Η προσθήκη μιας υδρόφιλης επίστρωσης σημαίνει βέλτιστη και σταθερή απελευθέρωση υγρού.

Χημική σύνθεση:

Τα Medipal Disinfectant Wipes χρησιμοποιούν χημεία υψηλών προδιαγραφών, αναμειγνύοντας αποτελεσματικά δύο απολυμαντικές ενώσεις, το DDAC (ένα άλας τεταρτοταγούς αμμωνίου) και μια τριαμίνη, για να παραχθεί ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό, ευρέως φάσματος, απολυμαντικό χωρίς αλκοόλες (σε καθαρές και ρυπαρές συνθήκες).

Υλικά:

Το υλικό Tritex® κατασκευάζεται με τη συγκόλληση στρωμάτων ινών πολυπροπυλενίου spunbond και meltblown με μια διαδικασία υψηλής θερμότητας, πριν από την εφαρμογή μιας υδρόφιλης επίστρωσης. Αυτό το υλικό είναι 100% συνθετικό.



Υψηλή αντοχή

Το υλικό προσφέρει υψηλή αντοχή και στις δύο κατευθύνσεις – κατά μήκος και κατά πλάτος του μαντηλιού.



Εξαιρετική συγκράτηση διαλύματος

Διασφάλιση ομοιόμορφης υγρασίας σε όλο το μαντηλάκι.



Ελάχιστα χνούδια

Χαμηλός κίνδυνος να μείνουν μολυσματικές ίνες στις επιφάνειες.



Αποτελεσματική απελευθέρωση διαλύματος

Τα δραστικά συστατικά μεταφέρονται στην επιφάνεια αντί να παγιδεύονται στις ίνες του μαντηλιού.

Αποτελεσματικότητα

Αποτελεσματικό έναντι	Τεστ	Χρόνος επαφής	
		Ρυπαρές συνθήκες	Καθαρές συνθήκες
Βακτηριοκτόνο			
Enterococcus hirae	EN 16615	1 λεπτό	1 λεπτό
	EN 13727	1 λεπτό	30 δευτερόλεπτα
Pseudomonas aeruginosa	EN 16615	1 λεπτό	1 λεπτό
	EN 13727	1 λεπτό	30 δευτερόλεπτα
Staphylococcus aureus	EN 16615	1 λεπτό	1 λεπτό
	EN 13727	1 λεπτό	30 δευτερόλεπτα
Escherichia coli	EN 13727	1 λεπτό	30 δευτερόλεπτα
Μυκοβακτηριοκτόνο			
Mycobacterium avium	EN 14348		1 λεπτό
Mycobacterium terrae	EN 14348		1 λεπτό
Ιοκτόνο			
Adenovirus type 5	EN 14476	2 λεπτά	1 λεπτό
	EN 16777		1 λεπτό
Murine Norovirus	EN 14476	2 λεπτά	1 λεπτό
	EN 16777		1 λεπτό
Poliovirus	EN 14476		2 λεπτά
Vaccinia virus	EN 14476	1 λεπτό	1 λεπτό
Coronavirus*	EN 14476	30 δευτερόλεπτα	1 λεπτό
*Tested against Human coronavirus, strain 229E	EN 16777		1 λεπτό
Ζυμοκτόνο και μυκητοκτόνο			
Aspergillus brasiliensis	EN 13624		2 λεπτά
Candida albicans	EN 16615	1 λεπτό	1 λεπτό
	EN 13624	1 λεπτό	1 λεπτό

Πρόσθετοι μικροοργανισμοί

Βακτηριοκτόνο			
Enterococcus faecium	EN 13727		30 δευτερόλεπτα
Acinetobacter baumannii	EN 13727	1 λεπτό	30 δευτερόλεπτα
Klebsiella pneumoniae	EN 13727	1 λεπτό	30 δευτερόλεπτα
MRSA (Methicillin Resistant Staphylococcus aureus)	EN 13727		1 λεπτό
VRE (Vancomycin Resistant Enterococcus faecalis)	EN 13727		1 λεπτό
MRSE (Methicillin Resistant Staphylococcus epidermidis)	EN 13727		2 λεπτά
Multidrug Resistant Acinetobacter baumannii	EN 13727		2 λεπτά
VRE (Vancomycin Resistant Enterococcus faecium)	EN 13727		2 λεπτά
Carbapenem Resistant Escherichia coli	EN 13727		2 λεπτά
Carbapenem Resistant Klebsiella pneumoniae	EN 13727		2 λεπτά
Multidrug Resistant Pseudomonas aeruginosa	EN 13727		2 λεπτά
Ζυμοκτόνο			
Candida Auris	EN 13624		1 λεπτό

medipal

Προϊόντα σε αυτή τη σειρά



50 Wipe Flow Wrap

Πακέτα ανά συσκευασία – 24

Ταξινόμηση – Ιατροτεχνολογικό προϊόν Class IIa

Κωδικός προϊόντος – S524110MPCE, S520110MPCE



200 Wipe Flow Wrap

Πακέτα ανά συσκευασία – 6

Ταξινόμηση – Ιατροτεχνολογικό προϊόν Class IIa

Κωδικός προϊόντος – S522110MPCE, S529110MPCE, S625110MPCE



200/240 Wipe Canister

Πακέτα ανά συσκευασία – 10

Ταξινόμηση – Ιατροτεχνολογικό προϊόν Class IIa

Κωδικός προϊόντος – W615110MPCE, W520110MPCE



200/225/350 Wipe Bucket

Πακέτα ανά συσκευασία – 4

Ταξινόμηση – Ιατροτεχνολογικό προϊόν Class IIa

Κωδικός προϊόντος – W621110MPCE, W527110MPCE, W522110MPCE



225 Wipe Refill

Πακέτα ανά συσκευασία – 4

Ταξινόμηση – Ιατροτεχνολογικό προϊόν Class IIa

Κωδικός προϊόντος – Q527110MPCE

Pal International Limited

Unit 3 Mountpark,
Victoria Road, Bardon II,
Ellistown,
Coalville,
LE69 1FA, UK

E: info@palinternational.com

W: www.palinternational.com

EC REP Advena Limited

Tower Business Centre
2nd Floor
Tower Street Swatar
BKR 4013, Malta

E: info@advena.mt

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΘΗΝΑ: Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος, Τηλ. Κέντρο 210 48 38 224
Fax: 210 48 38 547 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ. / Fax: 2310 216 718
Email: direct@pcosmidis.gr • Web site: www.pcosmidis.gr
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ΔΥ85/1348