




neodisher® IR



Όξινο καθαριστικό για εντατικό καθαρισμό χειρουργικών εργαλείων με βυθισμό

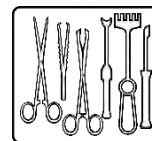

Συμπυκνωμένο υγρό

Πεδίο εφαρμογής:

- Εντατικός καθαρισμός χειρουργικών εργαλείων από ανοξείδωτο ατσάλι σε λουτρά βυθισμού και υπερήχων
- Εντατικός καθαρισμός με χρήση neodisher IR είναι κατάλληλος μόνο για εργαλεία από σκληρό ατσάλι ή χάλυβα χρωμίου-νικελίου

Φάσμα δράσης:

- Αφαιρεί λεκέδες και σκουριά
- Αυτο-ενεργή αφαίρεση επίμονων ανόργανων υπολειμμάτων σε εργαλεία, τα οποία μπορεί να προκύψουν από διάφορα σφάλματα στην επανεπεξεργασία, όπως ακατάλληλο νερό και ποιότητα ατμού αποστείρωσης

Ειδικές ιδιότητες:

- Μόνο για χειρουργικά εργαλεία κατασκευασμένα από σκληρό ατσάλι χρωμίου ή χρωμίου-νικελίου
- Δεν είναι κατάλληλο για εργαλεία κατασκευασμένα από μαλακό ατσάλι χρωμίου, μη κράματα, ελαφριά μέταλλα και άλλα υλικά που δεν είναι συμβατά με οξύ
- Δεν είναι κατάλληλο για επιχρυσωμένα ή επινικελωμένα εργαλεία
- Για εργαλεία από ανοξείδωτο χάλυβα, τα οποία δεν διαθέτουν εγγύηση ποιότητας, πρέπει να πραγματοποιούνται δοκιμές για τον προσδιορισμό της καταλληλότητας
- Εργαλεία με ένθετα καρβιδίου είναι κατάλληλα για εντατικό καθαρισμό, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του οργάνου¹
- Με εργαλεία που έχουν γράμματα με λείζερ μπορεί να συμβεί άνοιγμα του χρώματος των γραμμάτων
- Δεν είναι κατάλληλο για τον πρώτο καθαρισμό ολοκαίνουργων εργαλείων
- Τα δοχεία που χρησιμοποιούνται για τον εντατικό καθαρισμό και οι σωλήνες εκροής, μέσω των οποίων εκκενώνονται τα διαλύματα IR neodisher, πρέπει

να είναι κατασκευασμένα από υλικό συμβατό με οξύ (οι σωλήνες Eternit και χυτοσιδήρου είναι ακατάλληλοι). Εάν είναι απαραίτητο, το διάλυμα του neodisher IR μπορεί να εξουδετερωθεί πριν από την απόρριψη με αλκαλικό απορρυπαντικό (χωρίς ενεργό χλώριο).

Εφαρμογή και δοσολογία:

Εντατικός καθαρισμός σε λουτρά βυθισμού:

δοσολογία: 10 - 100 ml/l
για εργαλεία με ένθετα καρβιδίου: 10 - 30 ml/l
θερμοκρασία: μέγιστη 50 °C

Τα εργαλεία βυθίζονται σε ζεστό διάλυμα neodisher IR. Μετά από χρόνο επαφής περίπου 1 ώρας, τα εργαλεία απομακρύνονται, ξεπλένονται καλά με νερό και στεγνώνουν. Τα εργαλεία που είναι πεντακάθαρα μεταφέρονται στην επικυρωμένη επανεπεξεργασία.

Εντατικός καθαρισμός σε λουτρό υπερήχων:

δοσολογία: 15 – 35 ml/l
θερμοκρασία: μέγιστη 50 °C

Τα εργαλεία βυθίζονται σε ζεστό διάλυμα neodisher IR. Ο χρόνος επαφής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 1 και 5 λεπτών σύμφωνα με τα δεδομένα του κατασκευαστή του εξοπλισμού. Τα εργαλεία απομακρύνονται, ξεπλένονται καλά με νερό και στεγνώνουν. Τα εργαλεία που είναι πεντακάθαρα μεταφέρονται στην επικυρωμένη επανεπεξεργασία. Πρέπει να τηρούνται πάντα οι οδηγίες του κατασκευαστή του λουτρού υπερήχων.

Εάν οι κηλίδες και οι λεκέδες δεν αφαιρεθούν πλήρως, κάτι που μπορεί να συμβαίνει με τον αποχρωματισμό που προϋπάρχει στα εργαλεία για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο καθαρισμός πρέπει να επαναληφθεί. Ο χρόνος επαφής στα λουτρά εμβάπτισης μπορεί να παραταθεί έως και 4 ώρες. Τα εργαλεία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραμένουν χωρίς έλεγχο στο διάλυμα όλη τη νύχτα.

Εάν οι λεκέδες παραμένουν μετά το βυθισμό, πρέπει να αναζητήσετε τη συμβουλή του τμήματος τεχνολογίας εφαρμογών, για να προσδιορίσουμε τη φύση του αποχρωματισμού και να επεξεργαστούμε μια ειδική μέθοδο για την αφαίρεσή του. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει προσπάθεια προσδιορισμού της αιτίας (ών), προκειμένου να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατό.

¹ Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου DIN EN ISO 17664



neodisher® IR

Πρέπει να αποφεύγεται το τρίψιμο με συρμάτινες βούρτσες, καθώς αυτή η επεξεργασία καταστρέφει ανεπανόρθωτα τις ανοξειδωτες επιφάνειες και τις καθιστά πιο ευαίσθητες στη διάβρωση.

Το διάλυμα neodisher IR πρέπει να ξεπλένεται εντελώς (κατά προτίμηση με απιονισμένο νερό)).

Σημειώσεις για την εφαρμογή:

- Για επαγγελματική χρήση μόνο.
- Μην αναμιγνύετε με άλλα προϊόντα.
- Η επανεπεξεργασία πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και πρέπει να πραγματοποιείται με κατάλληλη επικυρωμένη διαδικασία.
- Λάβετε υπόψη τις συστάσεις επανεπεξεργασίας των κατασκευαστών ιατρικών συσκευών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του DIN EN ISO 17664.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ρΗ	1,8 - 0,9 (10 - 100 ml/, υπολογισμ. σε απιονισμένο νερό, 20 °C)
Συντελεστής τιτλοδότησης	0.19 (σύμφωνα με τις οδηγίες τιτλοδότησης neodisher)
Πυκνότητα	περίπου 1.4 g/cm ³ (20 °C)

Συστατικά:

Συστατικά σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 648/2004 για τα απορρυπαντικά:
< 5 % μη ιονικά τασιενεργά
> 30 % φωσφορικά

Σήμανση CE:

Το neodisher IR συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Εάν προκύψει σοβαρό συμβάν με το προϊόν, το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια εθνική αρχή.

Πληροφορίες αποθήκευσης:

Να φυλάσσεται πάντα σε θερμοκρασία μεταξύ -15 και 30°C. Το προϊόν είναι ευαίσθητο στον παγετό κάτω από - 15°C. Χρησιμοποιείται για 3 χρόνια όταν αποθηκεύεται όπως συνιστάται. Για την ημερομηνία λήξης ανατρέξτε στην ετικέτα δίπλα στο σύμβολο της κλεψύδρας. 

Προειδοποιήσεις κινδύνων και οδηγίες ασφαλείας:

Για πληροφορίες ασφαλείας δείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας. Αυτά είναι διαθέσιμα στο www.drweigert.com στην κατηγορία "Service/ Downloads".

Απορρίψτε μόνο όταν το δοχείο είναι άδειο και κλειστό. Για απόρριψη υπολειμμάτων του προϊόντος, δείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

MB 4204/3-2
Ημερομηνία έκδοσης: 10/2020

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΘΗΝΑ: Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος, Τηλ. Κέντρο 210 48 38 224
Fax: 210 48 38 547 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ. / Fax: 2310 216 718
Email: direct@pcosmidis.gr • Web site: www.pcosmidis.gr
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ΔΥ86/1348

Με τις παραπάνω πληροφορίες, σύμφωνα με τις τρέχουσες γνώσεις μας, περιγράφουμε το προϊόν μας σχετικά με τις ανάγκες ασφάλειας, αλλά δεν εμπεριέχουμε καμία ποιοτική περιγραφή ή υποσχόμαστε ορισμένες ιδιότητες.