





neodisher® MediZym

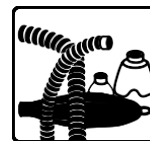

Απορρυπαντικό ουδέτερου pH για την επανεπεξεργασία θερμοανθεκτικών και θερμοευαίσθητων εργαλείων

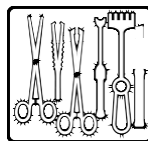

Συμπυκνωμένο υγρό

Τομείς εφαρμογής

- Για τον αυτόματο καθαρισμό χειρουργικών εργαλείων, αναισθησιολογικού εξοπλισμού, εύκαμπτων ενδοσκοπίων, κοντέινερς και άλλου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Φάσμα δράσης:

- Απομακρύνει κατάλοιπα ξεραμένου και μετουσιωμένου αίματος
- Ανοξειδωτος χάλυβας, χάλυβας εργαλείων, ελαφριά μέταλλα, γυαλί, συνηθισμένα πλαστικά και υλικά αναισθησιολογικού εξοπλισμού και εύκαμπτων ενδοσκοπίων είναι συμβατά με τα διαλύματα χρήσης του neodisher MediZym

Ειδικές ιδιότητες:

- Υψηλός βαθμός προστασίας υλικών
- Ουδέτερου pH βάση με ένζυμα και άλλα πρόσθετα καθαρισμού

Εφαρμογή και δοσολογία:

Το Neodisher MediZym μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλυντήρια απολυμαντές, καθώς και σε λουτρά εμβάπτισης και υπερήχων. Η δοσολογία εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το αντίστοιχο πεδίο εφαρμογής και τον βαθμό μόλυνσης των οργάνων που πρόκειται να επανεπεξεργαστούν. Οι ακόλουθες παράμετροι συνιστώνται κατά τη χρήση του neodisher MediZym.

Αυτόματος καθαρισμός θερμοανθεκτικών και θερμοευαίσθητων οργάνων	2 - 10 ml/l (0.2 - 1.0 %), 40 - 50 °C, 5 - 10 min
--	---

Αυτόματος καθαρισμός εύκαμπτων ενδοσκοπίων	5 ml/l (0.5 %), 5 - 10 min
Χειρωνακτικός καθαρισμός θερμοανθεκτικών και θερμοευαίσθητων οργάνων με εμβάπτιση	5 - 20 ml/l (0.5 - 2.0 %), max. 45 °C, 20 - 30 min
Χειρωνακτικός καθαρισμός θερμοανθεκτικών και θερμοευαίσθητων οργάνων σε λουτρό υπερήχων	5 - 20 ml/l (0.5 - 2 %), max. 45 °C, 5 - 10 min

Το διάλυμα χρήσης του neodisher MediZym πρέπει να αντικαθίσταται τουλάχιστον καθημερινά, και αμέσως σε περίπτωση ορατών ρύπων.

Το διάλυμα χρήσης του neodisher MediZym πρέπει να ξεπλένεται εντελώς (κατά προτίμηση με απιονισμένο νερό).

Για την αποφυγή στιγμάτων νερού, συνιστάται η χρήση πλήρως απιονισμένου νερού στο τελικό ξέβγαλμα.

Κύρια πεδία εφαρμογής:

- Για επαγγελματική χρήση μόνο.
- Μην αναμινύετε με άλλα προϊόντα
- Ξεπλύνετε το σύστημα δοσομέτρησης συμπεριλαμβανομένου του σωλήνα αναρρόφησης πριν αλλάξετε προϊόν.
- Η επανεπεξεργασία πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις των κανονισμών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και πρέπει να πραγματοποιείται με κατάλληλες επικυρωμένες διαδικασίες.
- Τηρείτε τις συστάσεις επανεπεξεργασίας των κατασκευαστών ιατρικών συσκευών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του DIN EN ISO 17664.



neodisher® MediZym

- Πρέπει να ακολουθούνται οι συστάσεις που δίνονται από τον κατασκευαστή του πλυντηρίου.

MB 4040/3-3

Ημερομηνία έκδοσης: 05/2021

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

pH	7.9 (2 - 20 ml/l, υπολογισμένο σε απιονισμένο νερό, 20 °C)
Πυκνότητα	περ. 1.0 g/cm ³ (20 °C)
Ιξώδες	< 10 mPas (συμπύκνωμα, 20 °C)

Συστατικά:

Συστατικά σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) Νο 648/2004 για τα απορρυπαντικά:

< 5% ανιονικά τασιενεργά

επίσης: ένζυμα, συντηρητικά (2-phenoxy-ethanol)

Σήμανση CE:



Το neodisher MediZym συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Εάν προκύψει σοβαρό συμβάν με το προϊόν, το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια εθνική αρχή.

Πληροφορίες αποθήκευσης:

Αποθηκεύστε σε δροσερό μέρος, μακριά από παγετό. Να φυλάσσεται πάντα σε θερμοκρασία μεταξύ 0 °C και 25 °C. Κρατήστε το μακριά από το ηλιακό φως. Χρησιμοποιείται για 2 χρόνια όταν αποθηκεύεται όπως συνιστάται.

Για την ημερομηνία λήξης ανατρέξτε στην ετικέτα δίπλα στο σύμβολο της κλεψύδρας.

Προειδοποιήσεις κινδύνων και οδηγίες ασφαλείας:

Για πληροφορίες ασφαλείας δείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας. Αυτά είναι διαθέσιμα στο www.drweigert.com στην κατηγορία "Service/Downloads".

Απορρίψτε μόνο όταν το δοχείο είναι άδειο και κλειστό. Για απόρριψη υπολειμμάτων του προϊόντος, δείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΘΗΝΑ: Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος, Τηλ. Κέντρο 210 48 38 224

Fax: 210 48 38 547 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ. / Fax: 2310 216 718

Email: direct@pcosmidis.gr • Web site: www.pcosmidis.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ΔΥ8δ/1348

Με τις παραπάνω πληροφορίες σύμφωνα με τις τρέχουσες γνώσεις μας, περιγράφουμε το προϊόν μας σχετικά με τις ανάγκες ασφαλείας, αλλά δεν περιλαμβάνουμε ποιοτική περιγραφή ή υπόσχεση συγκεκριμένων ιδιοτήτων.