




neodisher® N

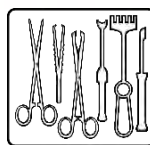

Όξινο απορρυπαντικό και εξουδετερωτικό για την αυτόματη επανεπεξεργασία οργάνων, γυάλινων σκευών εργαστηρίου και κλωβών ζώων

Συμπυκνωμένο υγρό

Τομείς εφαρμογής:

- Εξουδετέρωση αλκαλικών καταλοίπων κατά τον αυτόματο καθαρισμό χειρουργικών εργαλείων, αναισθησιολογικών εργαλείων, δοχείων, χειρουργικών παπουτσιών και βρεφικών μπουκαλιών καθώς και άλλων ιατρικών συσκευών
- Εξουδετέρωση αλκαλικών καταλοίπων κατά τον αυτόματο καθαρισμό εργαστηριακών γυάλινων σκευών
- Αυτόματη όξινη πρόπλυση γυάλινων εργαστηριακών σκευών
- Αυτόματης όξινος καθαρισμός κλωβών ζώων

Φάσμα δράσης:

- Απομακρύνει δυσχρωματισμούς, άλατα ασβεστίου, πουρί ούρων και άλλους διαλυτούς σε οξύ ρύπους
- Κατάλληλο για εργαλεία από γυαλί, κεραμικό υλικό, ανοξείδωτο χάλυβα, πλαστικά συμβατά με οξύ και καουτσούκ
- Δεν είναι κατάλληλο για μη σιδηρούχα μέταλλα, χρώμιο και επινικελωμένα μέρη καθώς και ανοδιωμένο αλουμίνιο

Ειδικές ιδιότητες:

- Ξεπλένεται εύκολα
- Χωρίς τασιενεργά

Εφαρμογή και δοσολογία:

Το neodisher N χρησιμοποιείται σε πλυντήρια απολυμαντές για εξουδετέρωση καθώς και για πρόπλυση και καθαρισμό. Η δόση εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την εφαρμογή.

Οι ακόλουθες παράμετροι πρέπει να τηρούνται κατά τη χρήση του neodisher N:

Εξουδετέρωση κατά την αυτόματη επανεπεξεργασία θερμοανθεκτικών και θερμοευαίσθητων οργάνων καθώς και εργαστηριακών γυάλινων σκευών	1 - 2 ml/l
Αυτόματη όξινη πρόπλυση και καθαρισμός εργαστηριακών γυάλινων σκευών	2 - 4 ml/l 40 - 60 °C
Αυτόματος όξινος καθαρισμός κλωβών ζώων	3 - 4 ml/l 60 - 80 °C

Χρησιμοποιήστε κατάλληλες συσκευές δοσομέτρησης.

Για την αποφυγή στιγμάτων νερού συνιστάται η χρήση απιονισμένου νερού στο τελικό ξέβγαλμα.

Το διάλυμα neodisher N πρέπει να ξεπλυθεί εντελώς (κατά προτίμηση με απιονισμένο νερό).

Κατά τη χρήση του neodisher N για πρόπλυση/καθαρισμό προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι τα είδη που πρέπει να πλυθούν, το πλυντήριο, το απολυμαντικό πλυντηρίου και οι σωλήνες αποστράγγισης είναι συμβατοί με οξέα. Οι σωλήνες αποστράγγισης Eternit και χυτοσιδήρου δεν είναι κατάλληλοι. Το διάλυμα που πρέπει να αποστραγγιστεί πρέπει να εξουδετερωθεί πριν από την αποστράγγιση.

Σημειώσεις για την εφαρμογή:

- Μόνο για επαγγελματική χρήση.
- Μην αναμιγνύετε με άλλα προϊόντα.
- Ξεπλύνετε το σύστημα δοσομέτρησης συμπ. του σωλήνα αναρρόφησης πριν την αλλαγή προϊόντος
- Η επανεπεξεργασία πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις των κανονισμών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και πρέπει να πραγματοποιείται με κατάλληλες επικυρωμένες διαδικασίες.
- Τηρείτε τις συστάσεις επανεπεξεργασίας των κατασκευαστών ιατρικών συσκευών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του DIN EN ISO 17664,



neodisher® N

τις συστάσεις καθαρισμού των κατασκευαστών εργαστηριακών γυάλινων σκευών καθώς και τις συστάσεις για την επανεπεξεργασία που παρέχονται από τον κατασκευαστή των κλωβών ζώων και τις συστάσεις της ομάδας εργασίας για την επεξεργασία κλωβών (AK KAB) στο τρέχον τεύχος του φυλλαδίου AK KAB «Ορθή επεξεργασία κλωβών σε εγκαταστάσεις ζώων».

- Πρέπει να ακολουθούνται οι συστάσεις που δίνονται από τον κατασκευαστή του πλυντηρίου.

Απορρίψτε μόνο όταν το δοχείο είναι άδειο και κλειστό. Για απόρριψη υπολειμμάτων του προϊόντος, δείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

MB 4201/3-1

Ημερομηνία έκδοσης: 03/2020

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

pH	2.2 - 1.8 (1 - 4 ml/l, υπολογισμένο σε απιονισμένο νερό, 20 °C)
Ιξώδες	< 50 mPa s (συμπύκνωμα, 20 °C)
Πυκνότητα	περ. 1.5 g/cm ³ (20 °C)
Συντ. τιτλοδότησης	0.16 (σύμφωνα με τις οδηγίες τιτλοδότησης neodisher)

Συστατικά:

Συστατικά σύμφωνα με τον Κανονισμό Νο 648/2004 για τα απορρυπαντικά:
> 30 % φωσφορικά άλατα

Σήμανση CE:



Το neodisher N συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Εάν προκύψει σοβαρό συμβάν με το προϊόν, το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια εθνική αρχή.

Πληροφορίες αποθήκευσης

Να φυλάσσεται πάντα σε θερμοκρασία μεταξύ 15 °C και 30 °C. Χρησιμοποιείται για 3 χρόνια όταν αποθηκεύεται όπως συνιστάται. Για την ημερομηνία λήξης ανατρέξτε στην ετικέτα δίπλα στο σύμβολο της κλειψύδρας.

Προειδοποιήσεις κινδύνων και οδηγίες ασφαλείας:

Για πληροφορίες ασφαλείας δείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας. Αυτά είναι διαθέσιμα στο www.drweigert.com στην κατηγορία "Service/Downloads".

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΘΗΝΑ: Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος, Τηλ. Κέντρο 210 48 38 224

Fax: 210 48 38 547 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ. / Fax: 2310 216 718

Email: direct@pcosmidis.gr • Web site: www.pcosmidis.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ΔΥ8δ/1348

Με τις παραπάνω πληροφορίες σύμφωνα με τις τρέχουσες γνώσεις μας, περιγράφουμε το προϊόν μας σχετικά με τις ανάγκες ασφαλείας, αλλά δεν περιλαμβάνουμε ποιοτική περιγραφή ή υπόσχεση συγκεκριμένων ιδιοτήτων.



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 • D-20539 Hamburg

Tel.: +49-40-7 89 60-0
Fax: +49-40-7 89 60-120

info@drweigert.de
www.drweigert.com