

neodisher[®] test strips

Δείκτες ελέγχου για τον έλεγχο της συγκέντρωσης του διαλύματος εργασίας neodisher endo[®] DIS active και neodisher[®] Septo Active



Περιεχόμενο πακέτου:

Ένας περιέκτης από αλουμίνιο με 50 δείκτες ελέγχου.

Διαβάθμιση χρώματος:


1% neodisher endo[®] DIS active ή neodisher[®] Septo Active αντίστοιχα και 2% neodisher endo[®] DIS active ή neodisher[®] Septo Active.

Γενικές ενδείξεις:



Αφαιρέστε από τον περιέκτη μόνο όσους δείκτες πρόκειται να χρησιμοποιήσετε. Κλείστε τον περιέκτη αμέσως αφού πάρετε το δείκτη. Μην ακουμπάτε το πεδίο ελέγχου του δείκτη.

Οδηγίες χρήσης:


① Βυθίστε το δείκτη στο διάλυμα για 2 δευτερόλεπτα.

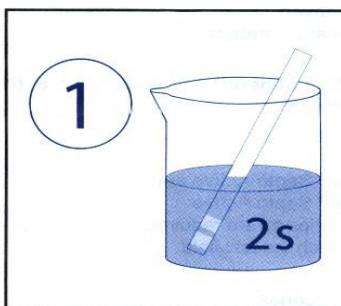

② Τινάξτε τον δείκτη ώστε να απομακρυνθεί το πλεονάζον νερό.

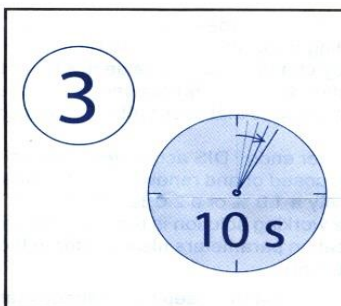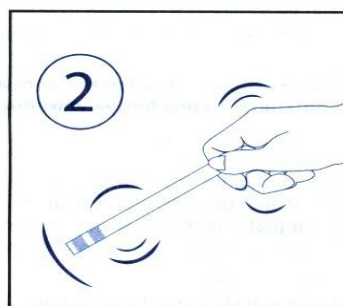

③ Περιμένετε για 10 Δευτερόλεπτα.

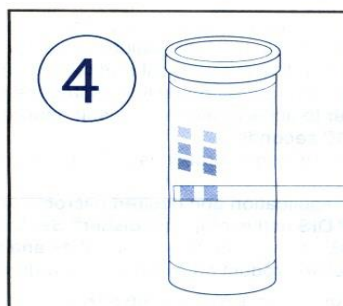

④ Στη συνέχεια συγκρίνετε αμέσως το χρώμα του πεδίου ελέγχου με αυτό της χρωματικής κλίμακας.

Επιλέξτε την απόχρωση της κλίμακας που ταιριάζει περισσότερο με αυτή του πεδίου ελέγχου (ακρίβεια ανάγνωσης: $\pm 1/2$ του τομέα της χρωματικής κλίμακας).

Το χρώμα του πεδίου ελέγχου μπορεί να αλλάξει αφού έχει ληφθεί η τιμή. Είναι κατά συνέπεια σημαντικό να προσδιοριστεί το χρώμα εντός του συγκεκριμένου χρονικού ορίου προκειμένου να λάβουμε σωστά αποτελέσματα. Αγνοήστε τις χρωματικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα μετά τον ενδεδειγμένο χρόνο αντίδρασης (10 δεύτερα).



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co.
Mühlenhagen 85, D – 20539 Hamburg
KG Telefon: (040) 789 60 – 0
E-Mail: info@drweigert.de
Telefax: (040) 789 60 – 120
Internet: www.drweigert.de

neodisher® test strips

Δείκτες ελέγχου για τον έλεγχο της συγκέντρωσης
του διαλύματος εργασίας neodisher endo® DIS active
και neodisher® Septo Active



Εάν μετά τη χρήση του δείκτη διαπιστωθεί πολύ χαμηλή συγκέντρωση, το διάλυμα εργασίας neodisher endo® DIS active ή neodisher® Septo Active αντίστοιχα, πρέπει να απορριφθεί και να ανανεωθεί.

Ανάλογα με την εφαρμογή και την επιθυμητή μικροβιοκτόνο δραστηριότητα, απαιτείται ενεργό διάλυμα εργασίας 1,0% ή 2,0% neodisher endo® DIS active ή neodisher® Septo Active αντίστοιχα.

Για τις μικροβιοκτόνους δραστηρότητες και παραμέτρους εφαρμογής, παρακαλούμε ανατρέξτε στα σχετικά φυλλάδια του προϊόντος (www.drweigert.com)

Αποθήκευση:

Αποφύγετε την έκθεση των δεικτών σε ηλιακό φως και υγρασία. Διατηρείστε τον περιέκτη σε δροσερό και ξηρό περιβάλλον. Αποθηκεύετε πάντα σε θερμοκρασία από 4 °C έως 30 °C. Εφόσον αποθηκεύονται σύμφωνα με τις οδηγίες, οι δείκτες ελέγχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην συσκευασία.

Πρόσθετες πληροφορίες:

Το καπάκι του δοχείου των δεικτών ελέγχου περιέχει έναν -μη τοξικό- παράγοντα διατήρησης ξηρότητας. Σε περίπτωση κατάποσης πιείτε άφθονο νερό.

Διάθεση:

Απορρίψτε τους χρησιμοποιημένους δείκτες όπως και τα οικιακά απορρίμματα.

Κωδικός εργοστασίου:

981320 SE



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co.
Mühlenhagen 85, D – 20539 Hamburg
KG Telefon: (040) 789 60 – 0
E-Mail: info@drweigert.de
Telefax: (040) 789 60 – 120
Internet: www.drweigert.de

v1.230517

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΘΗΝΑ: Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος, Τηλ. Κέντρο 210 48 38 224

Fax: 210 48 38 547 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ. / Fax: 2310 216 718

Email: direct@pcosmidis.gr • Web site: www.pcosmidis.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ΔΥ86/1348